



promed 4040

Elektrická bruska s funkcí odsávání

Elektrische Feile mit Absaugung

Electric file with suction function

Lime électrique avec aspiration

Lima elettrica completa di aspiratore

Lima eléctrica con aspiración

Elektrische vijl met afzuiging

Электрическая пила с вытяжкой для сбора пыли

Pilnik elektryczny z odsysaniem pyłu

Elektrisk fil med uppsugning

Sähkökäyttöinen kynsiviila ja imuri



CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU


PL

SE

FI

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

ZAŘÍZENÍ A PŘIPOJENÍ

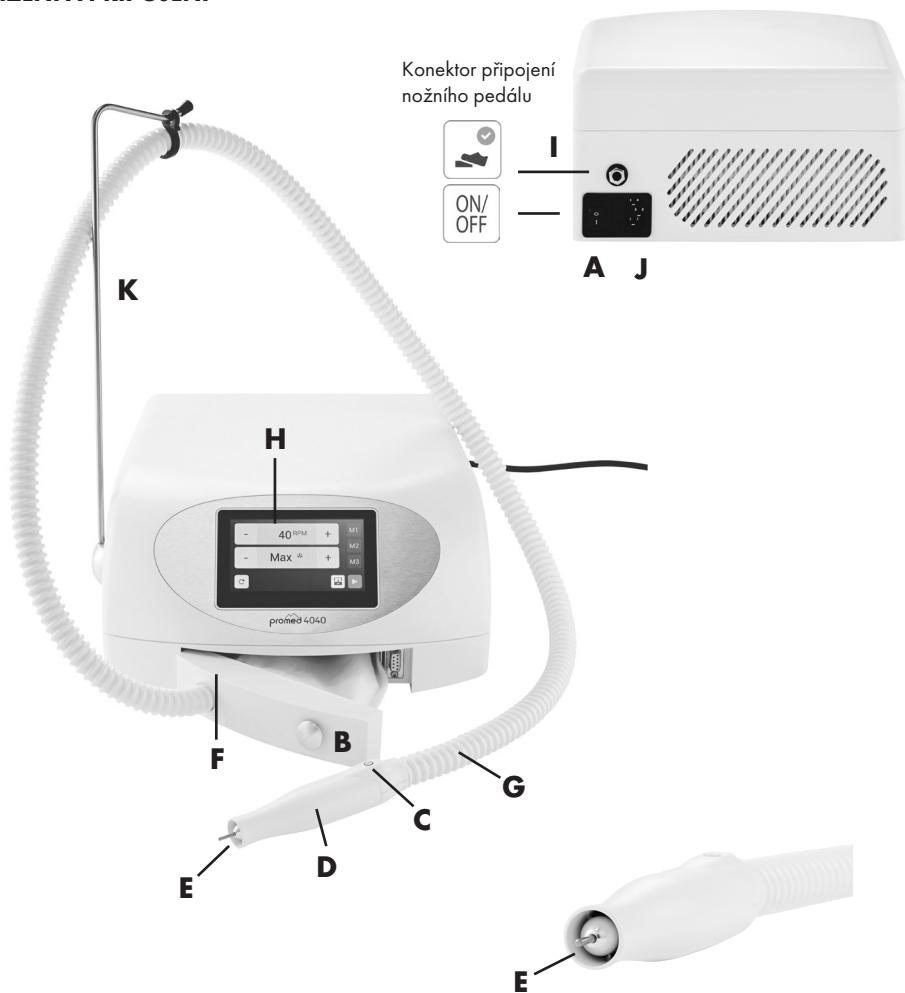

- A. Síťový vypínač s pojistkou
- B. Rukojeť pro vyjmutí komory filtru
- C. Mikrospínač
- D. Rukojeť
- E. Kleštiny / držák brusného kotouče
- F. Kryt pro filtrační komoru s konektorem

- G. Sací hadice
- H. Dotykový displej
- I. Připojovací zdířka pro nožní pedál
- J. Napájecí zásuvka
- K. Držák k zavěšení hadice

.CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL


RU

PL

SE

FI

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

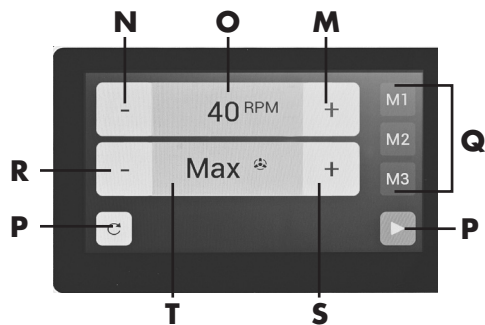

- L. Pravé / levé otáčení
- M. Zvýšení rychlosti
- N. Snížení rychlosti
- O. Posuvník pro nastavení rychlosti
- P. Start / pauza
- Q. Tlačítka paměti
- R. Snížení sacího výkonu
- S. Zvýšení sacího výkonu
- T. Posuvník nastavení sacího výkonu

Start / pauza/ pohotovostní rotace vpravo vpravo / vlevo		Spuštění
		Pauza / pohotovostní režim
		Pravý / levý chod
		Nožní pedál je připojen
	Zavřete příhrádku na prach / vypnout / zapnout	Při opětovném spuštění zařízení zjistí, že dvířka filtrační komory chybí nebo nejsou správně zavřena. Zavřete správně dvířka filtrační komory a zařízení vypněte a znovu zapněte.
		Když je filtrační komora otevřena během provozu, objeví se hlášení: „Dvířka filtrační komory nejsou správně uzavřena“. Správné zavření dvířek toto varování zruší.
		Prachový sáček je plný, nutná výměna. Tento alarm lze vymazat pouze tlačítkem ON / OFF.
		Alarmové hlášení: Safety Stop handpiece - rukojeť může být zablokována. Tento alarm bude vymazán restartováním.
		Alarmové hlášení: Prachový sáček je vadný / prach v zařízení. "Doporučuje se servis!" Chybu lze odstranit pouze restartováním zařízení.
		Při 5. alarmovém hlášení - „Přehřátí sací turbíny“ se objeví hlášení: „Důležitý servis!“ (Tato ikona - s červeným pozadím - zůstane na displeji trvale). Zařízení potřebuje servis, protože tuto alarmovou zprávu lze smazat pouze v servisním režimu.
		Alarmové hlášení: Sací turbína se přehřívá, "Doporučuje se servis". Tento alarm lze vymazat pomocí ON / OFF. Doporučuje se doba chlazení 10 minut.
		Při 5. alarmovém hlášení - „Přehřátí sací turbíny“ se objeví hlášení „Důležitý servis!“ (Tato ikona - s červeným pozadím - zůstane na displeji trvale). Zařízení potřebuje servis, protože tuto alarmovou zprávu lze smazat pouze v servisním režimu.
		Alarmové hlášení: "Přehřátí motoru násadce, doporučujeme servis". Tento alarm lze vymazat pomocí ON / OFF. Doporučuje se doba chlazení 5 minut.
		Po 5. alarmu - „Přehřátí motoru násadce“ - se objeví termín „Nutný servis!“ (Tato ikona - s červeným pozadím - zůstane trvale na displeji). Zařízení potřebuje servis, protože tuto alarmovou zprávu lze smazat pouze v servisním režimu.
		Po zapnutí zařízení bylo rozpoznáno, že bylo dosaženo nastaveného počtu provozních hodin. Při dosažení nastaveného počtu hodin je nutný servis přístroje. Toto upozornění lze vymazat pomocí Pause>Play. Tato zpráva se bude objevovat znovu a znovu, dokud neproběhne servis (zařízení potřebuje být uvedeno do servisního režimu v dílně).

- CZ
- DE
- EN
- FR
- IT
- ES
- NL
- RU
- PL
- SE
- FI

POPIS ZAŘÍZENÍ

Návod si pečlivě uschovejte!



Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte uživatelskou příručku. Chráníte tak sebe i ošetřovanou osobu a vyhnete se poškození přístroje.

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj na manikúru a pedikúru **Promed 4040**. Toto zařízení mohou používat kvalifikovaní odborníci, i soukromé osoby po přečtení tohoto návodu k obsluze.

Tento přístroj je určen pro použití v oblastech manikúry, nehtového designu (nail art) a pedikúry (např. odstranění zrohovatělé kůže a mozolů, péče o kůžičku, péče o nehty, ošetření zbytnělých nehtů atd.) a také pro kosmetickou péči o nohy a nehty (suchá technika). Přístroj je vhodný také pro práci v oblasti nehtové techniky a nehtového designu, stejně jako pro práci

se všemi druhy materiálů používaných v této oblasti jako gel a akryl.

Výrobce nenese v žádném případě zodpovědnost za zranění nebo poškození osob nebo majetku, které vyplývají z neznalosti těchto pokynů.

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ / OBSAH BALENÍ / PŘÍSLUŠENSTVÍ

Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Zařízení je dle předpisů navrženo pro provoz zásuvky s napájecím napětím 110-230 VAC.

- Při instalaci se ujistěte, že je přístroj umístěn na rovném povrchu a že větrací otvory v zadní a spodní části zařízení nejsou zakryty. Dostatek místa by měl být i vzadu, aby byla umožněna dostatečná cirkulace vzduchu. Prostor by měl být suchý a při normální teplotě (přístroj by neměl stát v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla nebo paroproudých zařízení).
- Přístroj **Promed 4040** je ideální pro manikúru a pedikúru, stejně jako kosmetickou péči o nohy a nehty.
- Pro **Promed 4040** se používají vysoce výkonné bezkomutátorové motory. Elektronická regulace otáček umožňuje plynule regulovat otáčky brusného kotouče. Zařízení má pravý a levý chod.
- Držák brusného kotouče je vhodný pro všechny běžně dostupné brusné kotouče se standardizovanou stopkou s rozměry 2,332 mm až 2,350 mm. Pro zajištění co nejdélsí životnosti držáku brusného kotouče používejte pouze kvalitní brusné kotouče se zaobleným koncem hřídele a s délkou hřídele 28 - 36 mm!
- Brusivo musí být vždy zcela zasunuto do držáku brusiva až na doraz.
- Při odkládání rukojeti dbejte na to, aby se brusný kotouč nedostal do kontaktu s jinými předměty. Hrozí nebezpečí stlačení a asymetrie hřídele. Asymetrie brusného kotouče při použití může poškodit rukojet!
- Vložky brusných kotoučů můžete zakoupit u svého místního specializovaného prodejce nebo u společnosti Promed (www.promed.de).
- Prachový sáček je určen pouze pro jednorázové použití (jednorázový výrobek) a nesmí se vyprazdňovat ani být použit vícekrát!
- Vystavení prachu z nehtů a kůže, může způsobit zdravotní rizika. Z hygienických důvodů se doporučuje ochrana obličeje / úst a rukavice.
- Aby byla zaručena hygienická práce, musí být brusné nástroje po použití dezinfikovány. Do kleštiny vkládejte pouze suché brusivo!
- Rukojet dezinfikujte pouze ořením.
- Informace o vhodných dezinfekčních prostředcích a vhodných produktech získáte od společnosti Promed. Pro čištění nástrojů a brusných kotoučů se doporučuje přístroj **Promed UC 50** (produkt č. 330210).
- Rukojet včetně dvířek filtrační komory (produkt č. 204041) a prachového sáčku můžete v případě potřeby nakoupit od společnosti Promed.

Obsah balení:

1x zařízení 4040 se závěsem hadice (produkt č. 204040)

1x rukojet Pom s dvířky filtrační komory (produkt č. 204041)

1x napájecí kabel (EU: produkt č. 411050, UK: produkt č. 411060)

2x sáček na prach

1x návod k obsluze s objednávkou servisu / opravy

CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY



Před prvním použitím věnujte pozornost následujícím pokynům:



Nikdy neumísťujte jednotku do přímého kontaktu s ohněm, plynem nebo kyslíkem, nebo horkými předměty jako jsou např. plotýnky.

Při používání mějte na paměti:

- A. Rukojeť smí být připojen pouze k dodanému zařízení.
- B. Používaná brusiva:
 - Standardizované rozměry: $\varnothing$ 2,332 – 2,350 mm, délka hřídele 28 - 36 mm.
 - Používejte pouze středové brusné kotouče se zaobleným koncem hřídele.
 - Nepoužívejte rezavé nebo ohnuté brusné kotouče.
- C. Ovladač rychlosti používejte opatrně.
- D. Napájení zařízení: 110 až 230 VAC.
- E. Před výměnou brusného kotouče zařízení vypněte.
- F. Učinite veškerá možná opatření, abyste zabránili pádu zařízení nebo jinému jeho poškození.
- G. Pokud se vyskytnou problémy s rukojetí, nechejte ji okamžitě opravit.
- H. Rukojeť nepromazávejte a nemýjte.
- I. Při skladování rukojeti vložte do kleštin výplňovou hřídel.
- J. Používejte pouze ve vnitřních prostorách.
- K. Při používání zařízení v blízkosti dětí je vyžadován pečlivý dohled.
- L. Vždy zajistěte, aby komora filtru zůstala čistá. To pomáhá předcházet tomu, že se cizí částice dostanou do sací turbíny a dojde k jejímu znečištění nebo dokonce poškození.
- M. Dávejte pozor, aby zařízení nebylo v provozu za následujících podmínek:
 - Když není nainstalován žádný prachový sáček.
 - Sáček na prach je vložen nesprávně.
 - Prachový sáček je nutné včas a pravidelně měnit (přeplněné prachové sáčky mohou prasknout!).
- N. Pokud se během provozu roztřhl sáček na prach a v komoře filtru je hodně brusného prachu, v žádném případě nepokračujte v provozu zařízení, jinak dojde k poškození sací turbíny. V takovém případě zašlete zařízení ihned do servisu! Na displeji se červeně zobrazí varování: „Důležitý servis!“ 
- O. Prachový sáček je určen pouze k jednorázovému použití a nesmí se vyprazdňovat ani používat vícekrát. Používejte pouze originální prachové sáčky Promed!



NEBEZPEČÍ!

- Zařízení nikdy nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Nikdy neumísťujte ani nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
- Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama.
- Provozujte zařízení pouze s předepsaným síťovým napětím.
- Zařízení nesmí být používáno venku.



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE!

- Se zařízením si nesmí hrát děti.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud jsou v dosahu děti nebo osoby, které nemají zkušenosti s jeho manipulací.
- Používejte zařízení pouze pro aplikace popsané v tomto návodu k použití.
- Používejte pouze nástavce a příslušenství doporučené výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte zařízení při poškození napájecího kabelu nebo po pádu zařízení nebo pokud přišel přístroj do kontaktu s vodou.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a pokud je tato osoba instruovala o používání zařízení tak, aby jimi byla pochopena související rizika.
- Nikdy nenechávejte děti hrát si s obalovým materiálem, hrozí nebezpečí udušení.
- Elektrické zařízení není dětská hračka. Děti při manipulaci nerozpoznají rizika, která by mohla při použití vzniknout. Proto zařízení nepoužívejte a skladujte mimo dosah dětí.

CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE!

- Nepokládejte ani nepoužívejte zařízení na horkých plochách nebo v blízkosti otevřených plynových plamenů, aby se neroztavil kryt.
- Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou. K čištění zařízení použijte vlhký hadřík a nepoužívejte rozpouštědla.
- Pokud se do zařízení dostane kapalina, okamžitě jej vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. V takovém případě se před pokračováním provozu zařízení obraťte na autorizovaného prodejce.
- Nenasávejte žádné tekutiny!
- Nikdy nenoste ani netahejte zařízení za napájecí kabel. Pomocí zástrčky vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Netahejte za samotný napájecí kabel.
- Netahejte síťový kabel přes ostré hrany, nesvírejte jej, nenechávejte jej volně viset, nepokládejte jej na horké předměty (např. plotýnkový vařič) ani jej přes ně nevěšete.
- Prodlužovací kabely použijte pouze tehdy, pokud jste se nejprve ujistili, že jsou v perfektním stavu.
- Pokud je poškozen napájecí kabel zařízení, můžete si objednat náhradní kabel.
- Neskladujte zařízení v blízkosti umyvadla nebo vany, protože to představuje nebezpečí.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Abyste předešli všem rizikům zranění, zablokování nebo poškození jednotky, zajistěte, aby se jednotka při provozu nedostala do kontaktu s oděvem, šňůrami, tkaničkami, štetinami, dráty, nitěmi, vlasy atd.
- Vystavení prachu z nehtů a kůže může způsobit zdravotní rizika. Z hygienických a bezpečnostních důvodů se doporučuje ochrana očí / úst a rukavice.

CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI

UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU



Nikdy neměňte brusný kotouč před vypnutím přístroje.




Zařízení nesmí být nikdy provozováno bez neporušeného sacího vaku.



Filtrační komora (**F**) musí být během provozu vždy uzavřena.

- Před uvedením spotřebiče do provozu zkontrolujte, zda uvedené napětí na spotřebiči odpovídá místní síti napětí. Poté zapojte síťový kabel do síťové zásuvky (**J**) na spotřebiči a síťovou zástrčku do síťové zásuvky.
- Nyní nasuňte nový prachový sáček na sací trubici ve dvířkách filtrační komory, nyní můžete vložit filtr na dveře komory. Nejprve umístěte na levou stranu a poté pevně zatlačte do konektoru na pravé straně.
- Vyberte vhodný brusný kotouč. Vložte brusný kotouč do přední části rukojeti držáku brusného kotouče (**E**). Jakmile se brusný kotouč začne otáčet, mechanismus se zablokuje automaticky. Nikdy brusný kotouč nevytahujte ani nevládejte násilím! Brusné frézy s průměrem hřídele 2,332 mm až 2,350 mm přesně pasují do držáku brusného kotouče bez použití nadměrné síly. Používejte pouze brusné kotouče s průměrem hlavy max. 12 mm. Vezměte prosím na vědomí, že maximální rychlost v provozu by měla činit 10 000 ot. / min, při vyšších otáčkách se chod stává nepravidelným a mohlo by dojít k poškození sklíčidla a silné nárazy mohou poškodit frézu. Chcete-li brusný kotouč vyjmout, vypněte prosím motor buď vypnutím zařízení síťovým vypínačem (**A**), nebo přepnutím do pohotovostního režimu tlačítkem pohotovostního režimu (**P**) nebo mikropsínačem na násadci (**C**). Teprve poté brusný kotouč vyjměte jednoduchým vytažením rovně.
- Po zapnutí zařízení se na displeji nejprve na několik sekund zobrazí (**H**) logo Promed a aktuální verze softwaru. Displej se poté změní na naposledy použité nastavení.

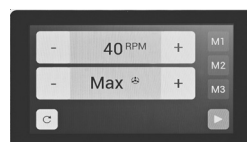

UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU

E. Ovládání směru otáčení a regulace rychlosti:

1. Výběr směru otáčení

Výchozí směr chodu je ve směru hodinových ručiček, na displeji je to indikováno šipkou směřující doprava, stisknutím tlačítka otáčení ve směru / proti směru hodinových ručiček **(L)** změníte směr otáčení na levý. Dalším stisknutím tlačítka otáčení ve směru / proti směru hodinových ručiček **(L)** přepnete zařízení zpět na směr hodinových ručiček



Upozornění:

Směr otáčení by se během provozu neměl měnit. Změna směru rotace během provozu vystavuje motor velmi vysokému zatížení a může jej poškodit.

2. Volba rychlosti:

Nyní zvolte požadovanou rychlost. Pro zvýšení rychlosti stiskněte tlačítko **+** **(M)** a chcete-li snížit rychlost, stiskněte tlačítko **-** **(N)**. Nastavená hodnota se pak zobrazí na displeji **(H)** dvěma číslicemi. Rychlost lze také nastavit zatlačením na lištu zobrazení (funkce posuvníku) nebo klepnutím na libovolné požadované místo v oblasti zobrazení rychlosti. Rozsah otáček se zobrazuje od 3 (3 000 ot. / min) do 40 (40 000 ot. / min.).



Upozornění:

Nastavená rychlost nesmí překročit maximální přípustnou rychlost podle specifikace brusiva výrobce.



F. Pauza / pohotovostní režim

1. Na zařízení

Tlačítko **(P)** poskytuje funkci „Start - pauza - pohotovostní režim“. Nastavené hodnoty zůstávají během pauzy nezměněny. Poslední zvolená rychlost a směr otáček se zobrazí se symbolem startu:  Po stisknutí tohoto tlačítka bude zařízení pokračovat v provozu s předchozím nastavením.

2. Na rukojeti

Stejnou funkci lze spustit stisknutím mikrospínače **(C)** na rukojeti.


G. Ochrana proti přetížení motoru rukojeti

- Pokud je rukojeť zablokována nebo přetížena, po cca 3 sekundách se sací turbína vypne. Na displeji **(H)** se zobrazí následující chybová zpráva: 

- Po opětovném stisknutí tlačítka „Start“ **(P)**  na displeji tento displej zhasne.

H. Ovládání sacího výkonu

- Sací výkon lze nastavit v 6 úrovních (ECO / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / MAX) Stisknutím tlačítka **(S)** se zvýší sací výkon a stisknutím tlačítka **(R)** jej snížíte. Sací výkon lze také změnit zatlačením na sloupové zobrazení (funkce posuvníku) nebo klepnutím na libovolné požadované místo v oblasti zobrazení sacího výkonu. Při nepřetržitém stisknutí tlačítek **+** a **-** dochází k rychlému průchodu jednotlivými stupni sacího výkonu.
- Na displeji se zobrazí nastavená hodnota výkonu. Zvolený sací výkon je zvýrazněn tmavší barvou.

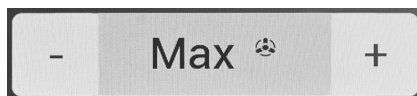

CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI

UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU



Upozornění:

Pro většinu případů je postačujícího sací výkonu dosaženo již při středním nastavení.



Upozornění:

Proud nasávaného vzduchu slouží také jako chlazení motoru rukojeti. Když je zařízení v provozu, běží. Sání je trvalé, alespoň při nejnižším nastavení. Sání nelze vypnout!!!



Upozornění:

Pokud je sací systém vadný, nesmíte s přístrojem dále pracovat!

I. Teplotní ochrana sací turbíny

Pokud sací turbína nedostává dostatečné chlazení a teplota vzduchu v tělese sací turbíny překročí 80 °C, sací turbína a rukojeť se vypnou. Na displeji se zobrazí červená chybová zpráva obrázek „Přehřátí sací turbíny“.



- Zařízení lze restartovat vypnutím a opětovným zapnutím vypínače na zadní straně zařízení.

Možné příčiny přehřátí sací turbíny:

- Zablokování sací hadice nebo rukojeti.
- Přehřátý filtrační sáček.
- Nedostatečná cirkulace vzduchu na zadní straně zařízení.
- Brusný prach v oblasti turbíny způsobený prasknutím prachového sáčku nebo používáním zařízení bez něj.



Upozornění:

Pokud lze vyloučit výše uvedené příčiny, ihned doporučujeme zaslat přístroj do servisu!

J. Ukládání hodnot rychlosti / funkce paměti

Vybraná nastavení rychlosti, sacího výkonu a směru chodu lze uložit stisknutím a podržením libovolného paměťového tlačítka **(Q)** po dobu alespoň 2 sekund. Například na M1 nízká rychlost pro velké frézy.

M1

M2

M3

K. Výměna prachového sáčku:

1. Vypněte přístroj a vyjměte dvířka filtrační komory.
To se provádí mírným zatažením za výsuvnou rukojeť. **(B)**.
2. Nyní přidržíte filtrační sáček jednou rukou na přední straně a vytáhněte hadicovou přípojku z otvoru..
3. Vyjměte plný prachový sáček a vyměňte jej za nový.
Instalace nového prachového sáčku probíhá opačným způsobem v opačném pořadí.
4. Ujistěte se, že nový prachový sáček není poškozen (tj. švy a těsnění na otevírání jsou perfektní).
Pokud sací výkon znatelně poklesne, nejspíše při zaplnění filtru do 2 / 3 je třeba filtr vyměnit ihned!
Jedině tak zajistíte plný sací výkon a zabráníte přehřátí sací turbíny v důsledku nedostatku sání.

CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI

UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU



Upozornění:

Používejte pouze originální prachové sáčky Promed!



Upozornění:

Filtrační sáček je určen pouze k jednorázovému použití a nesmí se vyprazdňovat resp. použít vícekrát! Plné sáčky na prach vyhoďte do zbytkového odpadu.



Upozornění:

Pokud se během provozu protrhne filtrační sáček a ve filtrační komoře je velké množství brusného prachu, v žádném případě nepokračujte v provozu zařízení, jinak dojde k poškození sací turbíny. V takovém případě zašlete zařízení ihned do servisu!



Upozornění:

Pokud je filtr příliš plný, hrozí nebezpečí prasknutí filtru! To může mít za následek že brusný prach se dostane do turbíny a zničí ji.



Upozornění:

Každý den před zahájením práce zkontrolujte stav filtračního sáčku (nasazení a úroveň naplnění). V případě potřeby vyměňte filtrační sáček podle výše uvedených pokynů. **Včasná výměna filtru prodlužuje životnost sací turbíny.**



Upozornění:

Nikdy nepřepravujte přístroj s naplněným prachovým sáčkem! To platí i při dlouhodobějším skladování zařízení nebo při odeslání zařízení do servisu.

L. Kontrolní systém doporučené výměny prachového sáčku

Promed 4040 je vybaven systémem kontroly prachového sáčku. Zařízení detekuje, že prachový sáček je plný a je třeba jej vyměnit, na displeji se zobrazí ikona :



Po výměně prachového sáčku a zavření dvířek sací komory / krytu filtrační komory, toto upozornění bude opět smazáno.

M. Nožní pedál (volitelné)

Jako příslušenství je k dispozici nožní pedál (**ON / OFF**). Pedál se připojuje k zadní straně přístroje do zásuvky pro nožní pedál (**I**).

Nožní pedál (**ON / OFF**) lze použít k aktivaci zařízení, tj. hodnoty nastavené na displeji pro rychlost a sání.

Zařízení se spustí sešlápnutím nožního pedálu. Odsunutím nohy z pedálu dojde k zastavení rukojeti a sací turbíny.



Upozornění:

Při ovládání nožního pedálu je funkce tlačítka pauzy na displeji (**P**) a na rukojeti (**C**) vypnuta, nožní pedál má vždy přednost.



Upozornění:

Lze použít pouze nožní pedály **Promed**.

N. Výměna pojistky zařízení

Pojistka zařízení je umístěna na zadní straně krytu. Před výměnou pojistky prosím vytáhněte přístroj ze zástrčky. Pro výměnu použijte šroubovák k otevření držáku pojistky a vyměňte pojistku T6.3A.

V případě poruchy:

- Zkontrolujte správné napájení.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť správně připojen k zařízení.
- Zkontrolujte, zda není roztržený sáček na prach.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť správně sestaven.
- Pokud používáte nožní pedál, zkontrolujte, zda zařízení funguje bez pedálu.
- Pokud se problémy nevyřeší, obraťte se na servisní středisko.

CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

Dotykový displej:

Jednoduché ovládání umožňuje vybrat všechny funkce klepnutím na příslušné tlačítko na displeji. Velký, dobře čitelný displej vám na první pohled poskytne všechny informace o zařízení.

Rychloupínací kleště:

Rychloupínací klešтина umožňuje jednoduchou, rychlou a plynulou výměnu brusných kotoučů. Jakmile se brusný kotouč začne otáčet, hřídel se automaticky uzamkne.

Ochrana proti přetížení motoru rukojeti:

Jednotka je vybavena ochranou proti přetížení rukojeti. V případě jakéhokoli zablokování nebo přetížení rukojeti, se otáčky motoru i vakuová turbína na cca 5 sekund vypnou.

Teplotní ochrana sací turbíny:

Pokud není sací turbína dostatečně chlazená a teplota vzduchu ve skříni sací turbíny překročí 80° C, sací turbína a rukojeť se vypnou.

PÉČE

Řídicí systém doporučené výměny prachového sáčku:

Systém kontroly prachového sáčku detekuje úroveň naplnění prachového sáčku a dává doporučení na displeji k výměně prachového sáčku.

Aby nedošlo k narušení bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu zařízení, nesmí být prováděna žádná rozšíření, nové úpravy nebo opravy, s výjimkou provedených oprav autorizovaných společností **Promed**.

- A. Udržujte vnitřek rukojeti (klešтина / držák brusného kotouče) co možná nejvíce očištěné od prachu a zbytků broušení.
- B. Odstraňujte nečistoty z vnější strany rukojeti hadříkem navlhčeným v alkoholu a vyhněte se vlhkosti uvnitř přístroje.
- C. Používejte pouze brusné kotouče, které splňují standardní velikost (ø 2,332 - 2,350 mm, délka hřídele 28 - 36 mm) a nepoužívejte zrezivělé nebo poškozené brusné kotouče. Špatné zacházení může vést k nadměrnému opotřebení kuličkových ložisek. Držte se doporučené bezpečnostní rychlosti a předepsaných bezpečnostních opatření výrobce brusného kotouče.
- D. Nevystavujte rukojeť silným nárazům, protože by mohlo dojít k poškození kuličkových ložisek. Pokud vám rukojeť spadla, zkontrolujte, zda není brusný kotouč ohnutý. Dávej si pozor při zvýšeném hluku nebo vývinu tepla. Pokud je rukojeť poškozena, zašlete ji na opravu.
- E. Před čištěním zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od sítě.
- F. Nepoužívejte agresivní látky, jako jsou abrazivní prostředky nebo jiné čisticí prostředky, které mohou způsobit korozi povrchu.
- G. Nikdy neponořujte zařízení do kapaliny a chraňte jej před kapalinami obsahujícími rozpouštědla nebo aceton.



Upozornění:

K čištění nepoužívejte **dezinfekční sprej**! Mohla by proniknout vlhkost a způsobit poškození (poškození ložisek v rukojeti, elektroniky v řídicí jednotce).



Upozornění:

Zařízení, rukojeť a motor rukojeti otřete dezinfekcí pouze po povrchu.

CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI


POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ RUKOJETI



Upozornění:

K čištění kleštin rukojeti nepoužívejte **stlačený vzduch**! Prach by se mohl dostat dovnitř a způsobit poškození. V závislosti na použití by měla být rukojeť čištěna alespoň jednou týdně.

1. Odstraňte plášť rukojeti tahem částí rukojeti přímo od sebe.

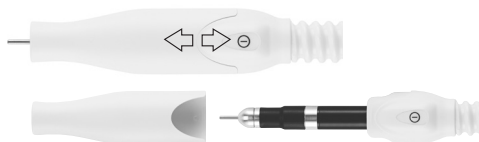

2. Vyčistěte oblast průtokových kanálů do sucha kartáčem.
3. Poté otřete celou sestavu motoru, skříň motoru a sestavu hadice pomocí vhodného čistícího hadříku.
4. Při sestavování rukojeti dbejte na správnou polohu dílů rukojeti. Obě části rukojeti lze přitlačit k sobě, dokud nezapadnou na místo.

SERVIS

Vaši zákazníci od vás očekávají profesionální výsledek. Toho je možné dosáhnout pouze s přístrojem, který není vadný ani poškozený.

LIKVIDACE

Toto zařízení je označeno níže uvedeným symbolem recyklace.



Symbol znamená, že zařízení musíte na konci jeho životnosti v souladu se směrnicí 2012 / 19 / EU a odpovídajícími národními zákony zlikvidovat odděleně na vhodném sběrném místě a nedávat ho do běžného netříděného odpadu.

Recyklace také zabráňuje nekontrolovanému ukládání odpadu, který poškozují životní prostředí a lidské zdraví. Proto prosím odevzdávejte všechna odpadní zařízení do příslušných sběrných systémů nebo zašlete zařízení k likvidaci na místo, kde jste zařízení zakoupili. Tam pak zařízení recyklují.

CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI

ZÁRUKA

Tento výrobek byl vyroben s veškerou péčí a před opuštěním továrny byl důkladně testován. Z tohoto důvodu je na tento výrobek poskytována záruka 24 měsíců od data nákupu. Pro kupující - podnikatele, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele, záruční doba na prodávané zboží je poskytována ve lhůtě 12 měsíců.

- V případě zjištění jakýchkoli vad na materiálu a vad spojených se špatnou výrobou v záruční době, budou všechny vadné součástky vyměněny a závady bezplatně odstraněny.
- **Záruka se nevztahuje na:**
 - Běžné opotřebení výrobku.
 - Vady způsobené přepravou nebo skladováním produktu.
 - Vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním nebo nedostatečnou údržbou.
 - Poškození v důsledku oprav produktu, které nebyly provedeny autorizovaným servisem **Promed**.
 - Poškození způsobené ostrými předměty v důsledku kroucení, stlačení, pádu a abnormálního stavu.
 - Díly podléhající opotřebení (např. pohyblivé části, jako jsou kuličková ložiska, motory, uhlíkové kartáče motoru atd., spojovací prvky) jsou obecně ze záruky vyloučeny.
- **Nárok v rámci záruky není vymahatelný, pokud:**
 - produkt není zaslán zpět v původním obalu nebo v dostatečně bezpečném obalu.
 - byl opraven nebo opraven neautorizovaným servisem **Promed**.
 - produkt byl opraven s použitím dílů, které nejsou schváleny společností **Promed**.
 - sériové číslo / číslo šarže produktu bylo odstraněno, smazáno, změněno nebo je nečitelné
- Na součásti opravené nebo vyměněné během záruční doby se vztahuje záruka pouze na zbytek původní záruční doby; za předpokladu, že taková výměna nebo oprava byla provedena autorizovaným servisem společnosti **Promed**.
- Záruční doba začíná dnem nákupu.
- Záruční nároky musí být uplatněny v záruční době. Na reklamace vzniklé po uplynutí záruční doby nelze brát zřetel.
- Záruka vstoupí v platnost za těchto záručních podmínek pouze v případě, že datum nákupu je prokazatelné nákupním dokladem nebo podobným způsobem.

Pro bezproblémové zpracování jsou nezbytné následující informace:

1. Originální prodejní doklad / účtenka nebo razítko prodejce s datem nákupu
2. Zjištěná závada
3. Název zařízení / typ / sériové číslo / číslo šarže

Typ výrobku:

BRUSKA PROMED 4030-SX2

Prodejce:

Distibutor pro ČR a SK: European Beauty Distribution, a.s. Türkova 828 149 00 Praha 4

CZ

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI