


+ maskology®

# PHOTON LED MASK

NÁVOD K POUŽITÍ K PHOTO LED MASK

Před použitím si pečlivě přečtete návod k použití.

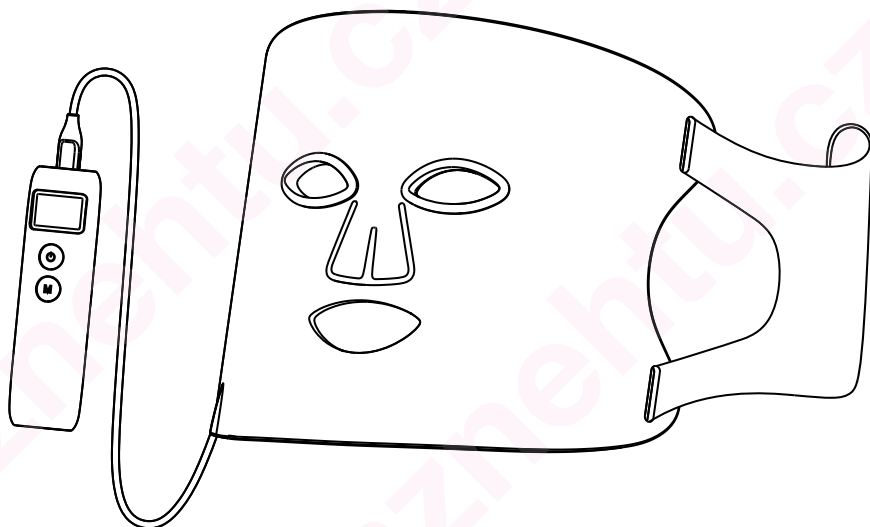


## VĚDA

Světelná terapie LED Face Mask aktivuje hluboké buňky pod kůží a zlepšuje stav pokožky pomocí specifických vlnových délek. Jedná se o neinvazivní, bezchemickou, bezbolestnou a bezpečnou metodu péče o pleť.

Světlo proniká do pokožky a přeměňuje se na intracelulární energii. To spouští fotochemickou a enzymatickou reakci, která aktivuje produkci glykogenu a bílkovin. To podporuje buněčný metabolismus a regeneraci kolagenu, což má příznivý vliv na omlazení pleti, potlačení akné a rozjasnění pokožky.

- Zaměřuje se na akné a skvrny pro čistou pleť.
- Omlazující účinky pro mladistvý vzhled pleti.
- Rozjasňuje a vyhlazuje pleť.
- Podporuje produkci kolagenu a obnovu buněk.

# SCHÉMA PRODUKTU

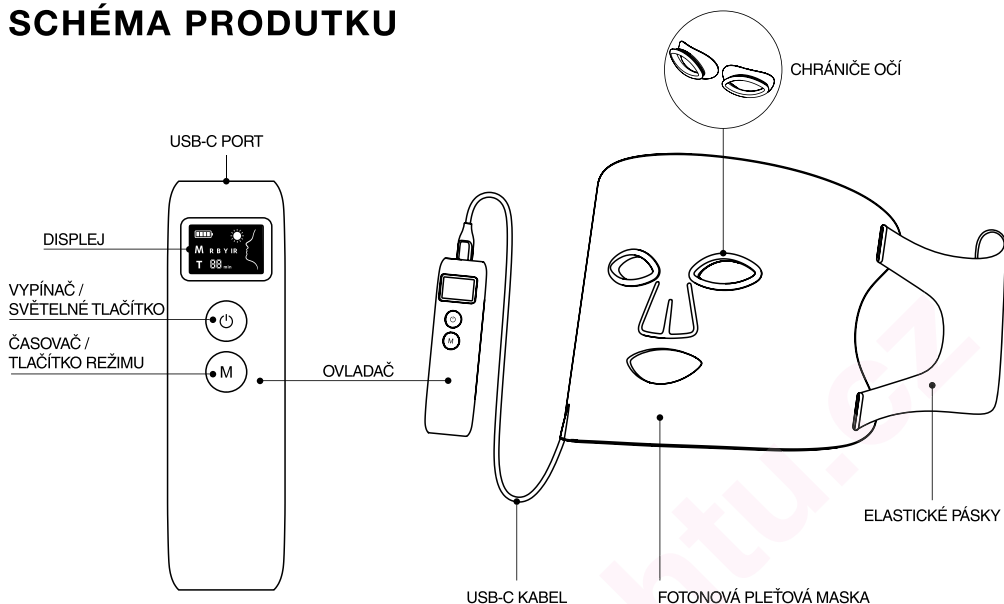

## VLASTNOSTI PRODUKTU



### EFEKTIVNÍ

Technologie 5 v 1 PHOTON LED poskytuje vysoce koncentrovanou a intenzivní energii pro péči o pleť.



### MULTIFUNKČNÍ

Světelná terapie s více typy světla zaměřená na různé potřeby pleti.



### BEZPEČNÁ

Neinvasivní metoda péče o pleť zajišťuje ošetření bez chemikálií a bez bolesti.



### PŘENOSNÁ / NA CESTY

Lehká konstrukce umožňuje použití doma i na cestách díky přiloženému cestovnímu pouzdru.



### POHODLNÁ

Měkký silikon šetrný k pokožce zajišťuje komfortní použití, zatímco nastavitelné popruhy na hlavě umožňují perfektní přizpůsobení.



### ÚSPORA ČASU A NÁKLADŮ


Jednokroková terapie s integrovaným časovačem pro snadné a pohodlné použití.



### PŘIZPŮSOBITELNÁ

Lze používat v kombinaci s vašimi oblíbenými kosmetickými produkty pro ještě lepší výsledky péče o pleť.

# SVĚTELNÉ REŽIMY

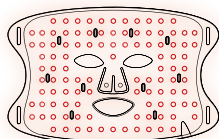


## TERAPIE ČERVENÝM LED SVĚTLEM – ANTI-AGING

Podporuje mladistvý a zářivý vzhled pleti stimulací tvorby kolagenu a zlepšením okysličení tkání. Napomáhá hloubkové regeneraci pokožky a pomáhá redukovat výskyt jemných linek a vrásek.

**Optimální doba ošetření:** 3x týdně, 10 minut

**Doporučené aktivní látky:** Vitamin C, retinol

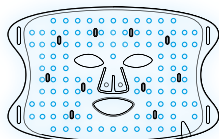


## TERAPIE MODRÝM LED SVĚTLEM – ZAMĚŘENO NA AKNĚ

Pomáhá zlepšit vzhled stávajících nedokonalostí pleti a současně minimalizuje vznik nových projevů akné.

**Optimální doba ošetření:** 2x týdně, 20 minut

**Doporučené aktivní látky:** Cica + Niacinamid, Retinol

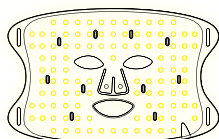


## TERAPIE ŽLUTÝM LED SVĚTLEM – ROZJASNĚNÍ PLETI

Podporuje využití kyslíku v kožních buňkách, zlepšuje mikrocirkulaci, napomáhá rozkladu a zesvětlení pigmentace a podporuje regeneraci buněk. Výsledkem je hladší a jasnější tón pleti.

**Optimální doba ošetření:** 3x týdně, 20 minut

**Doporučené aktivní látky:** Vitamin C, Kyselina Hyaluronová

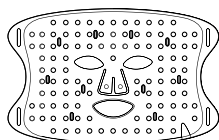


## TERAPIE BLÍZKÝM INFRAČERVENÝM LED SVĚTLEM – ZJEMNĚNÍ PÓRŮ

Podporuje tvorbu kolagenu v pokožce a urychluje metabolismus kožních buněk. Zároveň pomáhá rozjasnit tón pleti, zmenšit velikost pórů a zlepšit celkovou strukturu pokožky. Použití optimální vlnové délky LED světla podporuje obnovu buněk a stimulaci tvorby kolagenu, což přispívá ke zdravému vzhledu pleti.

***Upozornění:** Infračervené světlo není lidským okem viditelné, proto během použití nevidíte výrazné světlo. Můžete však zaznamenat mírný červený odlesk vycházející ze světelných diod.*

**Optimální doba ošetření:** 3x týdně, 10 minut

**Doporučené aktivní látky:** Skvalan, Vitamin C

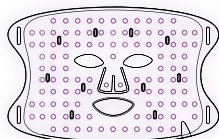

## TERAPIE FIALOVÝM LED SVĚTLEM (ČERVENÉ + MODRÉ) – ANTI-AGING / AKNĚ

Jedná se o kombinaci červeného a modrého světla, která pomáhá bojovat proti volným radikálům, redukovat zánětlivé projevy a zlepšovat mikrocirkulaci. Současně pomáhá cíleně působit proti akné a dalším nedokonalostem pleti.

**Optimální doba ošetření:** 3x týdně, 20 minut

**Doporučené aktivní látky:** Retinol, Cica + Niacinamid

## JAK POUŽÍVAT

1. Před prvním použitím plně nabijte ovladač.
2. Pomocí suchých zipů připevněte popruhy po stranách masky a vložte chrániče očí.
3. Zapojte kabel do portu ovladače.
4. Očistěte pleť a osušte ji ručníkem.
5. Přiložte masku k obličeji a upravte její polohu pro co nejlepší přizpůsobení. Pomocí popruhů upevněte suchý zip na zadní straně hlavy. Popruhy lze nastavit tak, aby maska pevně a pohodlně seděla. Ujistěte se, že chrániče očí dobře přiléhají k obličeji, aby nedocházelo k úniku světla.
6. Stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 2 sekund, čímž masku zapnete.
7. Stisknutím tlačítka napájení zvolíte jiný režim a pomocí tlačítka pro nastavení času vyberete délku ošetření. Lze zvolit 10, 20 nebo 30 minut.
8. Po uplynutí nastaveného času se zařízení automaticky vypne. Pokud chcete zařízení vypnout dříve, podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
9. Po ošetření pokračujte ve své běžné rutině péče o pleť – například aplikací plátýnkové masky, séra, hydratačního krému nebo oleje.
10. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte 3–5× týdně.

## NABÍJENÍ

1. Připojte ovladač k napájecímu adaptéru pomocí USB–C nabíjecího kabelu.
2. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky. Displej se rozsvítí a symbol baterie začne signalizovat nabíjení.
3. Doba nabíjení je přibližně 2,5 hodiny.
4. Plný symbol baterie znamená plné nabití. Nepřebíjejte zařízení – po zobrazení plného nabití jej odpojte od napájení.

## UPOZORNĚNÍ

- K čištění používejte suchý hadřík nebo vlhčené ubrousky bez obsahu alkoholu. Masku neoplachujte vodou, protože není vodotěsná. Nepoužívejte jiné čisticí prostředky, než jsou uvedeny v návodu. Použití jiných čisticích produktů může masku +maskology PHOTON LED MASK poškodit.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření a vysoké teploty.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
- Popruhy obsahují směs polyesteru, nylonu a lycry. Pokud jste na některý z těchto materiálů alergičtí, nemusí být pro vás použití popruhů vhodné.
- Masku nelze používat během nabíjení.
- Masku +maskology PHOTON LED MASK skladujte naplocho při pokojové teplotě v suchém prostředí, mimo přímé sluneční záření. Nerolujte ji.

## UPOZORNĚNÍ / VAROVÁNÍ

- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení bez předchozího odstranění krémů, sér, pleťových mlék a make-upu **PŘED** ošetřením. Některé složky v těchto produktech mohou způsobit citlivost na světlo nebo snížit účinnost ošetření. Pokud použijete +maskology PHOTON LED MASK bez předchozího odstranění těchto produktů, může dojít ke kožní reakci, poškození zařízení nebo snížení účinnosti LED ošetření.
- **NEPOKOUŠEJTE SE** masku +maskology PHOTON LED MASK žádným způsobem upravovat. Jakákoli úprava vede ke ztrátě záruky a může způsobit úraz elektrickým proudem při dalším použití zařízení. Zařízení neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel servisovat.
- **OKAMŽITĚ** vypněte a sejměte masku +maskology PHOTON LED MASK, pokud pociťujete horko nebo pokud je vaše pokožka nepříjemně teplá. Masku +maskology PHOTON LED MASK sama o sobě nevytváří teplo.

## NEPOUŽÍVEJTE V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADADECH

- Pokud jste zvláště citliví na světlo.
- Pokud jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte (riziko pro plod, novorozence nebo těhotné ženy není známé).
- Pokud trpíte epilepsií.
- Pokud aktuálně užíváte léky, které mohou způsobovat citlivost pokožky na světlo.
- Při spánku, chůzi nebo řízení.
- Pokud trpíte bolestmi hlavy vyvolanými světlem.
- K léčbě jiných stavů než těch, které jsou uvedeny v indikacích použití.
- Pokud trpíte lupus erythematodes, fotosenzitivním ekzémem nebo albinismem. Použití masky při těchto onemocněních může způsobit závažnou kožní reakci.
- Pokud trpíte jakoukoli fotosenzitivní poruchou (přecitlivělostí na světlo). Použití masky může vyvolat závažnou kožní reakci.
- Pokud užíváte léky, které mohou způsobovat fotosenzitivitu. Použití masky při současném užívání těchto léků může způsobit závažnou kožní reakci.
- Pokud trpíte jakýmkoli genetickým onemocněním oka. Fotosenzitivita je běžným vedlejším účinkem různých léků, například některých antibiotik, chemoterapeutik nebo diuretik. Pokud si nejste jisti, zda léky, které užíváte, mohou způsobovat fotosenzitivitu, poraďte se se svým lékařem.
- Jakýmkoli způsobem, který není přesně popsán v tomto návodu k použití. Použití mimo uvedené pokyny nebylo testováno a rizika nejsou známa.
- Pokud zařízení přišlo do kontaktu s vodou. Uchovávejte mimo **HORKÉ** povrchy.
- V blízkosti vody nebo na místech, kde může dojít k rozlití vody na zařízení.
- Pokud je zařízení, baterie nebo nabíjecí konektor jakýmkoli způsobem poškozen.